



OH-REP + Importeur: DÜRR DENTAL SCHWEZ AG, Grabenackerstraße 27, 8156 Oberhasli, ZÜRICH | TEL: +41 448850634

LUNOS

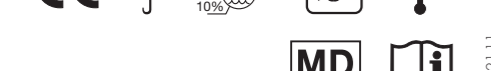

Lunos® Prophylaxepulver
Perio Combi
Lunos® Prophyl powder
Perio Combi

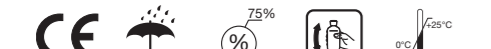

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Korwinstheim, DE
DÜRR DENTAL Company
Tel: +49 7142 705-0
www.duerdental.com
Made in Germany

DE Gebrauchsanweisung Lunos® Prophylaxepulver Perio Combi

Produktbeschreibung
Das „Prophylaxepulver Perio Combi“ ist ein Medizinprodukt. Dieses Produkt ist nur für die professionelle zahnärztliche Anwendung bestimmt und darf ausschließlich von Fachpersonal verwendet werden! Das „Prophylaxepulver Perio Combi“ ist zur sub- und supragingivalen Anwendung in handelsüblichen Pulverstrahlgeräten bestimmt. Bitte beachten Sie vor der Verwendung des Prophylaxepulvers die Gebrauchsanweisung Ihres Pulverstrahlgeräts. Das „Prophylaxepulver Perio Combi“ ist frei von Bleichmitteln, Inhaltsstoffen, Gluten, Laktose, Fruktose und Mikroplastik.

Indikation
Dieses Produkt wird empfohlen zur:
• Entfernung von periodontalen Biofilmen (z.B. im Rahmen der periodontalen Erhaltungstherapie) und/oder geeigneten subgingivalen Düse, z.B. dem Perio Tip von Dürr Dental
• Reinigung von Implantatoberflächen zur Unterstützung der Mucostabilität oder periodontaler Therapie nach erfolgter Implantattherapie
• schonende Plaqueentfernung im Sulsubereich und an besonders empfindlichen Zahnoberflächen
• Entfernung von tauchten Verfärbungen im supragingivalem Bereich
• Entfernen von Plaque auf kieferorthodontischen Apparaturen (Brackets)
Das Prophylaxepulver Perio Combi ist für Kinder und Erwachsene geeignet. Das Produkt ist nicht kariogen. Nicht verschlucken.

Kontraindikation
Patienten, die an chronischen Atemwegserkrankungen (z.B. Bronchitis oder Asthma) leiden, dürfen nicht mit dem Pulver-Wasserstrahlgerät behandelt werden, da das Aerosol befindliche Pulver zu Atemwegsbeschwerden führen kann. Ebenso sollte bei Patienten mit einer allergischen Reaktion auf Proteine (z.B. Weizen) oder auf „White Spots“ unterbleiben. Die Behandlung liefert periodontale Taschen kann zu einer Bakteriämie führen. Daher sind für Risikopatienten (Endokarditis, Schwangere, stillende Mütter, Infektionskrankung, Immunschwäche (Neutropenie, Agnaryulose, Diabetes, HIV/AIDS)) geeignete Maßnahmen und Einschränkungen zu treffen.

Warnhinweis
Nicht verschlucken. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit reichlich Wasser ausspülen. Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden. Das Präparat ist zur Anwendung am Menschen bestimmt.

Vorsichtsmaßnahmen
Bei der Arbeit mit dem „Prophylaxepulver Perio Combi“ auf geeignete Schutzmaßnahmen achten. Patient und Behandler müssen einen geeigneten Augenschutz, z.B. Schutzbrille tragen. Der Behandler muss geeignete Schutzkleidung, in Form von Mund-Nasen-Schutz und geeigneten Schuhschutzelementen tragen. Verwenden Sie eine geeignete Spraynebelabsaugkanüle z.B. die Dürr Dental Prophylaxe Kanüle. Das „Prophylaxepulver Perio Combi“ darf nur von entsprechend geschultem zahnmedizinischem Fachpersonal eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Strahl des Pulverstrahlgeräts nicht direkt auf feststehenden Zahnersatz und Füllungen ausgerichtet wird, da die Restaurationen beschädigt werden können. Richten Sie die Strahlhöhe während der Behandlung nicht direkt auf das Zahnlithium. Die direkte Bestrahlung des Weichgewebes kann zu einer Schmelz- und Zahnlithium-Ätzeinwirkung führen. Achten Sie auf eine geeignete Einheitszahn-Beleuchtung der Zahnoberfläche. Verwenden Sie einen Oberflächen- und dentin-Einheit nach der Anwendung des Prophylaxepulvers mit einem feuchten Tuch reinigen.

Arbeitsvorbereitung
Bitte entfernen Sie Pulverreste aus der Pulverkammer des Pulverstrahlgeräts vor der Montage des Dürr Dental „Prophylaxepulver Perio Combi“. Entfernen Sie die Pulverkammer-Flasche, bevor Sie das „Prophylaxepulver Perio Combi“ entnehmen. Bitte entfernen Sie von Entnahme des Pulvers das Originalstoppelsiegel. Entfernen Sie zu diesem Zweck den Kipphahn zu, ziehen Sie den Verschlussknopf nach außen, um den Verschluss des Deckels der Pulverkammer dringend darauf, dass diese vollständig trocken ist. Es darf keine Rest-feuchtigkeit, z.B. von Aufbereitungsmassnahmen, in der Kammer vorhanden sein. Bitte beachten Sie dringend, dass beim Entfernen des Pulvers in die Pulverkammer die maximale Füllhöhe der Pulverkammer nicht überschritten wird. Zur minimalen Staubaubtwicklung beim Befüllen der Kammer wird empfohlen, den Kipphahn zu betätigen und die Flasche leicht zu drücken.

Lagerung und Haltbarkeit
Bitte achten Sie darauf, die Flaschen sofort nach Entnahme des Pulvers wieder sorgfältig zu verschließen, damit das Prophylaxepulver seine Feuchtigkeits aufnimmt. In geschlossenen, luftdichten Räumen unter Vermeidung von Feuchtigkeit und Interaktion mit Licht zwischen 0°C und 25°C bei 10 bis 75% relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Bei Einhaltung der Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit im geschlossenen Behälter sechs Monate, nach Anbruch 12 Monate.

Entsorgung
Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Zusammensetzung
Prophylaxepulver Perio Combi: Trehalose, Hilfsstoffe
Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA, Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria | +43 512572834

**EN Operating Instructions
Lunos® Prophyl Powder Perio Combi**
Prophy Powder Perio Combi (REF: CPZ640A1950)
Product description
“Prophylaxepulver Perio Combi” is a medical device. This product is only intended for professional dental applications and must be used exclusively by qualified persons in a clinical setting. This product is intended for professional use only. The „Prophylaxepulver Perio Combi“ is designed for sub- and supragingival application in commercial powder jet devices. Please note the operating instructions of the powder jet device before use of the prophylaxis powder. The formulation of “Prophylaxepulver Perio Combi” is free of animal ingredients, gluten, lactose, fructose and microplastics.

Indication
This product is recommended for:
• Removal of periodontal biofilm in the scope of periodontal maintenance therapy (recall therapy) with a suitable subgingival nozzle or the Perio Tip from Dürr Dental
• Cleaning implant surfaces to support treatment of mucositis or peri-implantitis after completed initial therapy
• Gentle removal of plaque at the sulcus and particularly sensitive dental surfaces
• Removal of slight discolorations in supragingival regions
• Removal of plaque on orthodontic appliances (brackets)
Prophylaxepulver Perio Combi is suitable for children and adults. This product does not have a cariogenic effect. Do not swallow.

Contraindication
Patients suffering from chronic airway diseases (e.g. bronchitis or asthma) must not be treated with a powder-water jet device since the powder present in the aerosol can lead to difficult breathing. Likewise, the product should not be used in patients with hypersensitized enamel and white spots. The treatment of deep periodontal pockets can lead to bacteraemia. Therefore, suitable measures and restrictions must be undertaken for the treatment of risk patients (endocarditis, pregnant and lactating women, infectious diseases, immunodeficiency (neutropenia, agranulocytosis, diabetes, haemophilia), patients on treatment (radiation therapy, chemotherapy, antibiotic therapy)).

Warning
Do not swallow. Avoid contact with the eyes. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water. All serious events that occur in association with the product must be immediately reported to the manufacturer and the competent authority of your member state. The product is intended for use on human subjects.

Precautions
Use appropriate protective equipment when working with “Prophylaxepulver Perio Combi”. The patient and operator need to wear suitable eye protection, e.g. protective goggles. The operator needs to wear suitable protective equipment in the form of mouth nose protection and suitable protective gloves. Use a suitable spray mist aspiration apparatus, e.g. the Dürr Dental Prophylaxepulver Perio Combi. The prophylaxis powder may only be used by appropriately trained dental specialists. Please make sure you do not direct the jet of the powder jet device directly at fixed dental restorations and fillings as this may damage or dislodge the spray. Do not directly spray the patient. The jet of the powder during treatment. Direct exposure of the soft tissue may damage the gingiva. Also there is a risk of emphysema arising in the tissue and/or of embolism from air being introduced into blood circulation. To protect sensitive skin, please apply Vaseline to the patient’s lips before commencing treatment. After completion of treatment, clean the patient’s face with a moist disposable cloth, e.g. the Lunos® Prophylaxepulver Wellness Cloth. Please advise your patient that the ingestion of food or beverages (tea, coffee or other hot drinks) within the two to three hours after completion of the treatment may cause renewed discoloration of the teeth. Clean the surfaces of the dental unit with a moist cloth following the use of the prophylaxis powder.

Preparation
Please remove all residual powder from the powder chamber of the powder jet device before refilling it with “Prophylaxepulver Perio Combi”. Shake the closed bottle before removing any “Prophylaxepulver Perio Combi”. Remove the tamper-proof seal after removing the powder. For this purpose, take the lid off the bottle, pull off the seal and then screw the lid back on the bottle. It is essential that you make sure that the powder chamber is completely dry before filling it. There must be no residual moisture in the chamber, e.g. from reprocessing measures. When filling the powder chamber with powder, you need to make sure not to exceed the maximum filling level of the powder chamber.
To minimise the amount of dust generated when you fill the chamber, it is recommended that you use the rocker and compress the bottle tightly.

Storage and shelf life
Please make sure that the bottles are carefully closed again immediately after removing the powder so that the prophylaxis powder does not absorb any moisture. Store in enclosed, well-ventilated rooms away from moisture and bright light between 0°C and 25°C with a relative humidity of up to 75%. Do not store in direct sunlight. When the storage conditions are observed, the shelf life is 36 months in the sealed container and 12 months after opening.

Disposal
This product is in accordance with the local official regulations.
Composition
Prophy Powder Perio Combi: Trehalose, excipients
Dürr Dental (Products) UK Ltd.
14 Linnet Way – Telford Way, Industrial Estate
Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom
Tel: +44 1536526740

FR Notice d'utilisation Lunos® Poudre prophylactique Perio Combi

Poudre prophylactique Perio Combi (REF : CPZ640A1950)
Description du produit
La « poudre prophylactique Perio Combi » est un produit médical. Ce produit est uniquement destiné à un usage professionnel en médecine dentaire et doit être utilisé exclusivement par un personnel spécialisé ! La « poudre prophylactique Perio Combi » est destinée à une application sous-gingivale et supra-gingivale dans des appareils à jet de poudre courants. Avant d'utiliser la poudre prophylactique, veillez à respecter la notice d'utilisation de votre appareil. La composition de la « poudre prophylactique Perio Combi » est exempte d'ingrédients d'origine animale, de gluten, de lactose, de fructose et de microplastiques.

Indication
Ce produit est recommandé pour:
• le retrait du biofilm periodontal dans le cadre d'un traitement parodontal de conservation (thérapie de soutien) avec une buse sous-gingivale appropriée, par ex., la Pointe Dürr Dental
• le nettoyage des surfaces d'implants pour aider dans le traitement d'une mucosite ou d'une péri-implantite après une thérapie initiale réussie
• l'élimination en douceur de la plaque à niveau de la poche parodontale et sur les surfaces dentaires particulièrement sensibles
• l'élimination de légères décolorations dans la zone supra-gingivale
• l'élimination de la plaque dentaire sur les appareillages orthodontiques (appareils orthodontiques)

La poudre prophylactique Perio Combi convient aux enfants et aux adultes. Le produit n'a pas d'effet cariogène. Ne pas avaler.
Contre-indications
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par ex., bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil à jet de poudre d'eau, car la poudre se trouvant dans l'aérosol peut provoquer des difficultés respiratoires. Évitez aussi toute application sur un émail dentaire abîmé ou sur un émail endommagé et sur les tâches blanches dues à l'usage abusif de produits de blanchiment. Le traitement de poches parodontales profondes peut entraîner une bactériémie. C'est pourquoi, pour les patients à risques (patients souffrant d'endocardite, femmes enceintes ou en période d'allaitement, maladies contagieuses, immunodéficiences: neutropénie, agranulocytose, diabète, hémiplégie, patients sous traitement: patients sous traitement avec des médicaments à visée antibiotiques), il importe de prendre des mesures et restrictions appropriées.

Précautions
Utiliser un équipement de protection adéquat lors de l'utilisation de la « poudre prophylactique Perio Combi ». Le patient et le dentiste doivent porter une protection oculaire adéquate, par ex., des lunettes de protection. Le dentiste doit porter un équipement de protection adéquat sous forme d'un masque de protection et de gants de protection.

**ES Instrucciones de uso
Lunos® Polvo profiláctico Perio Combi**
Polvo profiláctico Perio Combi (REF: CPZ640A1950)
Descripción del producto
El “Polvo profiláctico Perio Combi” es un producto sanitario. Este producto está destinado únicamente para la aplicación odontológica profesional y solo debe ser utilizado por personal dental especializado. El “Polvo profiláctico Perio Combi” está destinado para la aplicación subgingival y supragingival en pulverizadores de chorro de polvo comunes. Antes de usar el polvo profiláctico, tenga en cuenta las instrucciones de uso del pulverizador de chorro de polvo. La receta de “Polvo profiláctico Perio Combi” está libre de sustancias de origen animal, gluten, lactosa, fructosa y microplástico.

Indicación
Este producto se recomienda para:
• Eliminación de biofilm periodontal en el marco de la terapia de mantenimiento periodontal (terapia recall) con una tobera subgingival adecuada, p. ej. Perio Tip de Dürr Dental
• Limpieza de la superficie de implantes como apoyo al tratamiento de la mucositis o perimplantitis después del tratamiento inicial
• Eliminación suave de la placa en la zona del surco y en superficies dentales especialmente sensibles
• Eliminación de decoloraciones leves en el área supra-gingival
• Eliminación de la placa en aparatos de ortodoncia (brackets)
El polvo profiláctico Perio Combi es apto para niños y adultos. El producto no es cariogénico. No ingerir.

Contraindicación
Los pacientes que sufren enfermedades crónicas de las vías respiratorias (p. ej., bronquitis o asma) no deben ser tratados con un aparato de chorro de agua y polvo, ya que el polvo que se encuentra en el aerosol puede provocar dificultades en las vías respiratorias. Evite también cualquier aplicación en esmalte dental no intacto así como en esmalte hipomalinizado y “white spots”. El tratamiento de bolsillos periodontales profundos puede provocar bacteriemia. Para pacientes de riesgo (endocarditis, mujeres embarazadas, madres lactantes, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias (neutropenia, diabetes, hemofilia), pacientes con tratamiento (radioterapia, quimioterapia y antibióticos)) se deben tomar las medidas y restricciones necesarias.

Eliminación
Eliminación conformemente a las prescripciones locales reglamentarias.
Composición
Poudre prophylactique Perio Combi: tréhalose, excipients
DÜRR DENTAL FRANCE S., rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France | +33 155691150
DÜRR DENTAL BENELUX BVBA, Moldenheidelaan 97, 3191 Hever, Belgium | +32 1516627

IT Istruzioni d'uso Lunos® Polvere per la profilassi Perio Combi

Polvere per profilassi Perio Combi (REF: CPZ640A1950)
Descrizione del prodotto
La “Polvere per profilassi Perio Combi” è un dispositivo medico. Questo prodotto è destinato unicamente per l'applicazione odontologica professionale e deve essere utilizzato solo da personale tecnico specializzato! La “Polvere per profilassi Perio Combi” è prevalentemente destinata all'applicazione sotto-gingivale e supra-gingivale tramite l'utilizzo di sbiancatori a getto di polvere in commercio. Prima di utilizzare la polvere per profilassi, leggere le istruzioni per l'uso dello sbiancatore a getto di polvere. La formulazione della “Polvere per profilassi Perio Combi” è priva di ingredienti di origine animale, glutine, lattosio, fruttosio e microplastiche.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall) tramite l'utilizzo di un ugello sottogingivale idoneo, ad es. il puntale Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla terapia della mucosite e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discromie lievi nella zona supra-gingivale
• Rimozione della placca in apparecchi ortodontici (brackets)
Il prodotto non è cariogeno. Non ingerire.

Controindicazioni
I pazienti affetti da malattie croniche alle vie respiratorie (ad esempio bronchite o asma) non devono essere sottoposti a trattamenti con sbiancatori, dato che la polvere presente nell'aerosol può compromettere la normale funzione respiratoria. Evitare l'applicazione sullo smalto non intatto e/o polimerizzato, nonché sulle macchie bianche. Il trattamento di tasche parodontali profonde può causare batteriemia. Pertanto è importante prendere le debite precauzioni per i trattamenti di pazienti a rischio (pazienti affetti da endocardite, donne in gravidanza o in allattamento, persone con malattie infettive, immunodeficienze (neutropenia, agranulocitosi, diabete, emofilia), pazienti in trattamento (pazienti sottoposti a radioterapia, chemioterapia, pazienti durante la terapia antibiotica)).

Avvertenza
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciogliere con abbondante acqua. Tutti gli eventi gravi verificatisi in relazione al prodotto devono essere comunicati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nel uomo.

Precauzioni
Quando si lavora con la “Polvere per profilassi Perio Combi”, assicurarsi di indossare un'adeguata attrezzatura di protezione. Il paziente e l'operatore devono indossare un'adeguata protezione per gli occhi, ad esempio occhiali di protezione. L'operatore deve indossare un'adeguata attrezzatura di protezione, come una mascherina che protegga bocca e naso e guanti di protezione adeguati. Utilizzare un aspiratore con un'aspirazione della nube di aerosol, come ad es. la cannula per profilassi di Dürr Dental. La “polvere per profilassi Perio Combi” può essere utilizzata solo da personale odontologico adeguatamente preparato. Assicurarsi che il getto dello sbiancatore a getto di polvere non sia puntato direttamente su protesi fisse e ortodontici, in quanto in caso contrario i restauri possono essere danneggiati. Non indirizzare l'ugello dello sbiancatore direttamente sulla gengiva durante il trattamento. Un'esposizione diretta del tessuto molle può danneggiare la gengiva. Sussiste inoltre il rischio di formazione di embolia nel flusso arteriale.
Per para que se forme un mínimo de polvo al llenar la cámara, se recomienda utilizar el paño y presionar ligeramente la botella.

Amalgamación y durabilidad
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro. El preparado de uso humano. La preparación destinada al uso en humanos.
Composición
Polvo profiláctico Perio Combi: tréhalosa, excipientes
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain | +34 9317183335

PT Instruções de utilização Lunos® Pó profilático Perio Combi

Pó profilático Perio Combi (REF: CPZ640A1950)
Descrição do produto
O “pó profilático Perio Combi” é um dispositivo médico. Este produto destina-se somente à aplicação odontológica profissional e deve ser usado exclusivamente por pessoal especializado! O “pó profilático Perio Combi” destina-se à utilização sob e supra-gingival em dispositivos de póimento a ser disponíveis no mercado. Antes de utilizar o pó profilático, leia as instruções de utilização do seu dispositivo de póimento a ar. A composição do “pó profilático Perio Combi” é livre de ingredientes animais, gluten, lactose, frutose e microplástico.
Indicação
Este produto é recomendado para:
• Remoção do biofilme periodontal no âmbito do tratamento periodontal de manutenção (terapia de suporte) com uma tobera subgingival adequada, p. ex., o Perio Tip da Dürr Dental
• Limpeza das superfícies dos implantes como apoio à terapia de mucosite ou terapia de periimplantite após a terapia inicial
• Remoção delicada da placa na zona do sulco e em superfícies dentais especialmente sensíveis
• Remoção de manchas ligeiras na zona supra-gingival
• Remoção da placa em aparelhos ortodônticos (brackets)
O produto não é cariogênico. Não ingerir.

Contraindicação
Os pacientes que sofrem de doenças respiratórias crônicas (por ex. bronquite ou asma) não devem ser submetidos a tratamento com um dispositivo de póimento a ar e água, uma vez que o pó encontrado no aerosol pode causar dificuldades respiratórias. Evite também qualquer aplicação em esmalte dental não intacto, bem como em esmalte hipomalinizado e “white spots”. O tratamento de bolsos periodontais profundos pode causar bacteriemia. Para pacientes de risco (pacientes de risco com endocardite, grávidas, lactantes, doenças infecciosas, deficiências imunológicas (neutropenia, agranulocitose, diabetes, hemofilia), pacientes em tratamento (radioterapia, quimioterapia e antibioterapia)) devem ser tomadas as devidas precauções.
Per genare mo polvo possible durante il riempimento del serbatoio, si consiglia di utilizzare la leva e di comprimere leggermente il flacone.

Immagazzinaggio e durata
Assicurarsi di sigillare con cura i flaconi immediatamente dopo aver prelevato la pol-vere. Conservare il prodotto in ambienti asciutti e ben ventilati, evitando l'umidità e la luce intensa tra 0°C e 25°C con un'umidità relativa compresa tra il 10% e il 75%. Proteggersi dai raggi diretti della luce. Se le condizioni di conservazione non vengono rispettate, la durata di conservazione in contenitori chiusi è di 36 mesi e 12 mesi dopo l'apertura.

Avvertenza
Non ingerir. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enxaugar con bastante agua. Todos os incidentes graves relacionados com o produto devem ser imediatamente comunicados ao fabricante e à autoridade competente do seu Estado-Membro. A preparação destinada a aplicação em pessoas.
Composição
Polvere per profilassi Perio Combi: trealosio, excipienti
DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell'Artigianato n. 8, 20053 Muggiò (MI), Italy | +39 0395970300

Smalltalk
Smaltito secondo le normative locali ufficiali.
LUNOS® Prophylaxepulver Perio Combi
Prophylaxepulver Perio Combi (REF: CPZ640A1950)
Produktbeschreibung
Prophylaxepulver Perio Combi ist ein medizintechnisches Produkt. Den hier produktiert ar fast ausschließlich mit anwandig kariogenem und für entarndes anwendung am menschen bestimmt.

**ES Instrucciones de uso
Lunos® Polvo profiláctico Perio Combi**

Polvo profiláctico Perio Combi (REF: CPZ640A1950)
Descripción del producto
El “Polvo profiláctico Perio Combi” es un producto sanitario. Este producto está destinado únicamente para la aplicación odontológica profesional y solo debe ser utilizado por personal dental especializado. El “Polvo profiláctico Perio Combi” está destinado para la aplicación subgingival y supragingival en pulverizadores de chorro de polvo comunes. Antes de usar el polvo profiláctico, tenga en cuenta las instrucciones de uso del pulverizador de chorro de polvo. La receta de “Polvo profiláctico Perio Combi” está libre de sustancias de origen animal, gluten, lactosa, fructosa y microplástico.

Indicación
Este producto se recomienda para:
• Eliminación de biofilm periodontal en el marco de la terapia de mantenimiento periodontal (terapia recall) con una tobera subgingival adecuada, p. ej. Perio Tip de Dürr Dental
• Limpieza de la superficie de implantes como apoyo al tratamiento de la mucositis o perimplantitis después del tratamiento inicial
• Eliminación suave de la placa en la zona del surco y en superficies dentales especialmente sensibles
• Eliminación de decoloraciones leves en el área supra-gingival
• Eliminación de la placa en aparatos de ortodoncia (brackets)
El polvo profiláctico Perio Combi es apto para niños y adultos. El producto no es cariogénico. No ingerir.

Contraindicación
Los pacientes que sufren enfermedades crónicas de las vías respiratorias (p. ej., bronquitis o asma) no deben ser tratados con un aparato de chorro de agua y polvo, ya que el polvo que se encuentra en el aerosol puede provocar dificultades en las vías respiratorias. Evite también cualquier aplicación en esmalte dental no intacto así como en esmalte hipomalinizado y “white spots”. El tratamiento de bolsillos periodontales profundos puede provocar bacteriemia. Para pacientes de riesgo (endocarditis, mujeres embarazadas, madres lactantes, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias (neutropenia, diabetes, hemofilia), pacientes con tratamiento (radioterapia, quimioterapia y antibióticos)) se deben tomar las medidas y restricciones necesarias.

Eliminación
Eliminación conformemente a las prescripciones locales reglamentarias.
Composición
Poudre prophylactique Perio Combi: tréhalose, excipients
DÜRR DENTAL FRANCE S., rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France | +33 155691150
DÜRR DENTAL BENELUX BVBA, Moldenheidelaan 97, 3191 Hever, Belgium | +32 1516627

Medidas de precaución
Preste atención al uso de un equipo de protección adecuado al trabajar con “Polvo profiláctico Perio Combi”. El paciente y la persona que realice el tratamiento deben utilizar un equipo de protección ocular adecuado, p. ej. gafas de protección. La persona que realice el tratamiento debe usar un equipo de protección personal especializado en forma de mascarilla de protección contra el spray y guantes de protección adecuados. Utilice una cámara de aspiración de niebla de aerosol, p. ej. la cámara Dürr Dental Prophix. El “Polvo profiláctico Perio Combi” solo puede ser utilizado por personal especializado en odontología debidamente capacitado. Tenga en cuenta que el chorro del pulverizador de chorro de polvo no se puede dirigir directamente a prótesis dentales fijas ni a empastes, ya que el polvo puede dañar o desmenuzarse. Evite la aplicación en esmalte dental no intacto y en esmalte hipomalinizado y “white spots”. El tratamiento de bolsillos periodontales profundos puede provocar bacteriemia. Para pacientes de riesgo (endocarditis, mujeres embarazadas, madres lactantes, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias (neutropenia, diabetes, hemofilia), pacientes con tratamiento (radioterapia, quimioterapia y antibióticos)) se deben tomar las medidas y restricciones necesarias.

Preparación del trabajo
Elimine los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo antes de utilizar el polvo. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. En la cámara no debe haber restos de humedad, p. ej. de las medidas de preparación. Al llenar la cámara de polvo, tenga en cuenta necesariamente que no se debe separar el nivel máximo de la cámara de polvo y que se forme un mínimo de polvo al llenar la cámara, se recomienda utilizar el paño y presionar ligeramente la botella.
Amalgamación y durabilidad
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro. El preparado de uso humano. La preparación destinada al uso en humanos.
Composición
Polvo profiláctico Perio Combi: tréhalosa, excipientes
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain | +34 9317183335

Medidas de precaución
Preste atención al uso de un equipo de protección adecuado al trabajar con “Polvo profiláctico Perio Combi”. El paciente y la persona que realice el tratamiento deben utilizar un equipo de protección ocular adecuado, p. ej. gafas de protección. La persona que realice el tratamiento debe usar un equipo de protección personal especializado en forma de mascarilla de protección contra el spray y guantes de protección adecuados. Utilice una cámara de aspiración de niebla de aerosol, p. ej. la cámara Dürr Dental Prophix. El “Polvo profiláctico Perio Combi” solo puede ser utilizado por personal especializado en odontología debidamente capacitado. Tenga en cuenta que el chorro del pulverizador de chorro de polvo no se puede dirigir directamente a prótesis dentales fijas ni a empastes, ya que el polvo puede dañar o desmenuzarse. Evite la aplicación en esmalte dental no intacto y en esmalte hipomalinizado y “white spots”. El tratamiento de bolsillos periodontales profundos puede provocar bacteriemia. Para pacientes de riesgo (endocarditis, mujeres embarazadas, madres lactantes, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias (neutropenia, diabetes, hemofilia), pacientes con tratamiento (radioterapia, quimioterapia y antibióticos)) se deben tomar las medidas y restricciones necesarias.

Preparación del trabajo
Elimine los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo antes de utilizar el polvo. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. En la cámara no debe haber restos de humedad, p. ej. de las medidas de preparación. Al llenar la cámara de polvo, tenga en cuenta necesariamente que no se debe separar el nivel máximo de la cámara de polvo y que se forme un mínimo de polvo al llenar la cámara, se recomienda utilizar el paño y presionar ligeramente la botella.
Amalgamación y durabilidad
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro. El preparado de uso humano. La preparación destinada al uso en humanos.
Composición
Polvo profiláctico Perio Combi: tréhalosa, excipientes
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain | +34 9317183335

Medidas de precaución
Preste atención al uso de un equipo de protección adecuado al trabajar con “Polvo profiláctico Perio Combi”. El paciente y la persona que realice el tratamiento deben utilizar un equipo de protección ocular adecuado, p. ej. gafas de protección. La persona que realice el tratamiento debe usar un equipo de protección personal especializado en forma de mascarilla de protección contra el spray y guantes de protección adecuados. Utilice una cámara de aspiración de niebla de aerosol, p. ej. la cámara Dürr Dental Prophix. El “Polvo profiláctico Perio Combi” solo puede ser utilizado por personal especializado en odontología debidamente capacitado. Tenga en cuenta que el chorro del pulverizador de chorro de polvo no se puede dirigir directamente a prótesis dentales fijas ni a empastes, ya que el polvo puede dañar o desmenuzarse. Evite la aplicación en esmalte dental no intacto y en esmalte hipomalinizado y “white spots”. El tratamiento de bolsillos periodontales profundos puede provocar bacteriemia. Para pacientes de riesgo (endocarditis, mujeres embarazadas, madres lactantes, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias (neutropenia, diabetes, hemofilia), pacientes con tratamiento (radioterapia, quimioterapia y antibióticos)) se deben tomar las medidas y restricciones necesarias.

Preparación del trabajo
Elimine los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo antes de utilizar el polvo. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. En la cámara no debe haber restos de humedad, p. ej. de las medidas de preparación. Al llenar la cámara de polvo, tenga en cuenta necesariamente que no se debe separar el nivel máximo de la cámara de polvo y que se forme un mínimo de polvo al llenar la cámara, se recomienda utilizar el paño y presionar ligeramente la botella.

Amalgamación y durabilidad
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro. El preparado de uso humano. La preparación destinada al uso en humanos.
Composición
Polvo profiláctico Perio Combi: tréhalosa, excipientes
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain | +34 9317183335

Medidas de precaución
Preste atención al uso de un equipo de protección adecuado al trabajar con “Polvo profiláctico Perio Combi”. El paciente y la persona que realice el tratamiento deben utilizar un equipo de protección ocular adecuado, p. ej. gafas de protección. La persona que realice el tratamiento debe usar un equipo de protección personal especializado en forma de mascarilla de protección contra el spray y guantes de protección adecuados. Utilice una cámara de aspiración de niebla de aerosol, p. ej. la cámara Dürr Dental Prophix. El “Polvo profiláctico Perio Combi” solo puede ser utilizado por personal especializado en odontología debidamente capacitado. Tenga en cuenta que el chorro del pulverizador de chorro de polvo no se puede dirigir directamente a prótesis dentales fijas ni a empastes, ya que el polvo puede dañar o desmenuzarse. Evite la aplicación en esmalte dental no intacto y en esmalte hipomalinizado y “white spots”. El tratamiento de bolsillos periodontales profundos puede provocar bacteriemia. Para pacientes de riesgo (endocarditis, mujeres embarazadas, madres lactantes, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias (neutropenia, diabetes, hemofilia), pacientes con tratamiento (radioterapia, quimioterapia y antibióticos)) se deben tomar las medidas y restricciones necesarias.

Preparación del trabajo
Elimine los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo antes de utilizar el polvo. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. En la cámara no debe haber restos de humedad, p. ej. de las medidas de preparación. Al llenar la cámara de polvo, tenga en cuenta necesariamente que no se debe separar el nivel máximo de la cámara de polvo y que se forme un mínimo de polvo al llenar la cámara, se recomienda utilizar el paño y presionar ligeramente la botella.
Amalgamación y durabilidad
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro. El preparado de uso humano. La preparación destinada al uso en humanos.
Composición
Polvo profiláctico Perio Combi: tréhalosa, excipientes
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain | +34 9317183335

Medidas de precaución
Preste atención al uso de un equipo de protección adecuado al trabajar con “Polvo profiláctico Perio Combi”. El paciente y la persona que realice el tratamiento deben utilizar un equipo de protección ocular adecuado, p. ej. gafas de protección. La persona que realice el tratamiento debe usar un equipo de protección personal especializado en forma de mascarilla de protección contra el spray y guantes de protección adecuados. Utilice una cámara de aspiración de niebla de aerosol, p. ej. la cámara Dürr Dental Prophix. El “Polvo profiláctico Perio Combi” solo puede ser utilizado por personal especializado en odontología debidamente capacitado. Tenga en cuenta que el chorro del pulverizador de chorro de polvo no se puede dirigir directamente a prótesis dentales fijas ni a empastes, ya que el polvo puede dañar o desmenuzarse. Evite la aplicación en esmalte dental no intacto y en esmalte hipomalinizado y “white spots”. El tratamiento de bolsillos periodontales profundos puede provocar bacteriemia. Para pacientes de riesgo (endocarditis, mujeres embarazadas, madres lactantes, enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias (neutropenia, diabetes, hemofilia), pacientes con tratamiento (radioterapia, quimioterapia y antibióticos)) se deben tomar las medidas y restricciones necesarias.

Preparación del trabajo
Elimine los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo antes de utilizar el polvo. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. Antes de utilizar el polvo, asegure que la cámara de polvo está completamente seca. En la cámara no debe haber restos de humedad, p. ej. de las medidas de preparación. Al llenar la cámara de polvo, tenga en cuenta necesariamente que no se debe separar el nivel máximo de la cámara de polvo y que se forme un mínimo de polvo al llenar la cámara, se recomienda utilizar el paño y presionar ligeramente la botella.
Amalgamación y durabilidad
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro. El preparado de uso humano. La preparación destinada al uso en humanos.
Composición
Polvo profiláctico Perio Combi: tréhalosa, excipientes
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A., Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain | +34 9317183335

Medidas de precaución
Preste atención al uso de un equipo de protección adecuado al trabajar con “Polvo profiláctico Perio Combi”. El paciente y la persona que realice el tratamiento deben utilizar un equipo de protección ocular adecuado, p. ej. gafas de protección. La persona que realice el tratamiento debe usar un equipo de protección personal especializado en forma de mascarilla de protección contra el spray y guantes de protección adecuados

